



# JOBST® LymphCARE

## Bandážovací set pro kompresivní terapii

### Lymfedém

Abnormální nahromadění tekutiny v intersticiálních pojivové tkáně výsledků vede k edému. Hromaděním tekutiny jsou vstupy a odliv vyvedeny z rovnováhy.




### Primární lymfedém

Příčinou pro primární lymfedému je vrozená malformace lymfatických cév.  
Vrozený lymfedém: je přítomen při narození  
Lymfedém praecox: vyvíjí se později v životě

### Sekundární lymfedém

Poranění zdravého lymfatického systému může mít za následek vznik lymfedému. Nejčastější příčinou je léčba zhoubných nádorů. Operace ale také radioterapie mají nepříznivý vliv na lymfatické cévy.

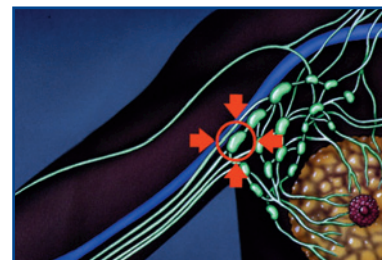

## Management lymfedému s Komplexní Dekongestivní Fyzioterapií (CDP)

CDP je léčba volby pro správu lymfedému.  
To sestává ze dvou fází:

Fáze 1: odlehčení

Fáze 2: Stabilizace a optimalizace



Jsou čtyři hlavní body v CDP :

- Ošetření kůže
- Manualní drenáž
- Kompresivní bandáž
- Cvičení

Kontakt pro ČR a SK: Helena Petrová, tel:+420 728 82 34 84,

email: [helena.petrova@cutimed.cz](mailto:helena.petrova@cutimed.cz), [www.cutimed.cz](http://www.cutimed.cz)

# JOBST® LymphCARE

## Komplexní Dekongestivní Fysioterapie

Phase 1 – Odlehčení

JOBST LymphCARE®

Phase 2 – Optimalizace a Udržení

JOBST Elvarex® zdravotní kompresní punčochy a návleky: Ploché pletení je vyráběno na zakázku.

## JOBST® LymphCARE

### Indikace

Lymfédém nebo edém horních a / nebo dolních končetin.

### Kontraindikace

Ischemie, nekontrolované městnavé srdeční selhání, neléčený septický zánět žil, phlegmasia cerulea dolens.

### Upozornění

Nehybnost, kožní infekce, sekretující dermatosy, neslučitelnost k tkanině, poruchy citlivosti končetiny. Leukoplast® náplast obsahuje suchou přírodní pryž.

### Další doporučení

Nesprávně použité obvazy, mohou při nošení způsobit problémy. Otevřené rány musí být ošetřeny vhodným krytím před bandážováním.

## JOBST® LymphCARE Kit

Kompletní řešení pro kompresivní bandáže paže, nohy a bérce.



### Pro plnou spokojenost

Všechny materiály potřebné pro kompresivní bandáže buď paže, nohy nebo dolní končetiny jsou shrnuty v JOBST® LymphCARE.

### Výrazně uspořádány a připraveny k použití

Všechny produkty jsou uspořádány v jasném způsobem pro snadné použití.

### Spolehlivá kvalita

JOBST® LymphCARE byl vyvinut ve spolupráci s dobře známou lymfédém-klinikou.

Produkt	Šíře	Počet komponentů v JOBST® LymphCARE		
		Paže (Ref. č. 78639)	Noha (Ref. č. 78642)	Bérec (Ref. č. 78641)
Tricofix® D5	6 cm	1	-	-
Elastická tubulární bandáž	8 cm	-	-	1
	10 cm	-	1	-
Elastomull®	4 cm	20	20	20
Elastická fixační bandáž				
Artiflex®	10 cm	2	2	3
Syntetická podkladová bandáž	15 cm	2	2	-
Comprilan®	6 cm	1	1	1
Krátkotažné obinadlo	8 cm	1	1	1
	10 cm	5	3	3
	12 cm	-	4	-
Leukoplast® náplast	1.25 cm	1	1	1
JOBST® Pěna	1 cm	1	1	1
Podkladový polštářek				
Taška	42 cm	1	1	1
Instrukce pro použití	-	1	1	1

Skupina - typ produktu	Katalog. číslo	Název a popis produktu	ks/bal	MJ kód u VZP	Kód VZP	Max úhrada VZP	Max cena
Kompresivní bandáž - set lymfo - paže	7863900	JOBST LYMPHCARE KIT ARM	1	bal	0171462	50,00 Kč	1 481,00 Kč
Kompresivní bandáž - set lymfo - bérec	7864100	JOBST LYMPHCARE KIT LOWER LEG	1	bal	0171463	50,00 Kč	1 335,00 Kč
Kompresivní bandáž - set lymfo - noha	7864200	JOBST LYMPHCARE KIT LEG	1	bal	0171464	50,00 Kč	1 740,00 Kč